

SÅDAN BRUGES LONE



Når barnet skal op eller ned fra Lone stolen, så læg armene til siden.



Vægten af armene kan få barnet til kun at bruge den ene arm, så placer den anden arm ved siden af barnet. Hvis barnet er okay med det, kan begge arme bruges. Start med 5-10 minutter og øg tiden efter behov.



Når Lone stolen ikke er i brug, skal armene ligge som et X ovenpå maven.



Se videoen på hjemmesiden om, hvordan du bruger stolen!

Vask:



Tørres over med hårdt opvreden klud, med vand og sæbe egnet til tekstil.

Garanti:

I tilfælde af en fabrikationsfejl giver Oliz® Koko-Nora to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet bruges efter hensigten. Skader forårsaget af forkert eller u hensigtsmæssig brug er undtaget fra garantien. **Denne stol er IKKE legetøj! Stolen egner sig KUN, som en hvilestol, i stillerum/snoezelrum til én person ad gangen, IKKE egnet til biblioteker, fællesrum med mange børn på én gang eller lign. lokaler.**

For yderligere spørgsmål om brugen af Oliz® Koko-Nora produktet, kontakt venligst den ansvarlige for produktet, Majbritt Hillerup.

Gem denne info side til senere brug!



5 740017 900065

Produkt: Lone

EN21856:2022, testet i henhold til standarden EN71-1-2-3

LONE

h v i l e s t o l e n

... er en specialdesignet stol beregnet til én person, der ofte oplever fysiske spændinger og uro. Giver dig afslapning og aflastning i hverdagen. Lone giver ro til kroppen og følelsen af at blive omfavnet, af de tunge arme der ligger hen over kroppen af barnet.

DK



Dansk design - produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz Koko-Nora - Birk Centerpark 84B - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54


SÅDAN BEHANDLER DU LONE

Undlad at hoppe/ kaste dig i stolen eller trække i ørerne!



Dette giver skader på stolen vi ikke dækker!

Hold stolen væk fra

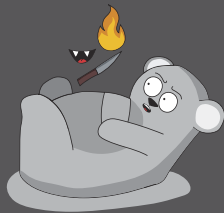

tænder, ild og skarpe/ varme genstande!

Rengør produktet med




vand og sæbe med en våd blød klud.

Kun til




indendørs brug!

Hold dig ovenpå produktet

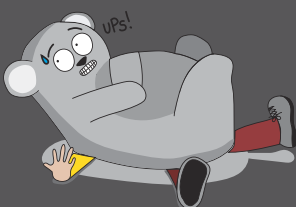

for at undgå risiko for kvælning!

Fyld stolen i et lukket rum

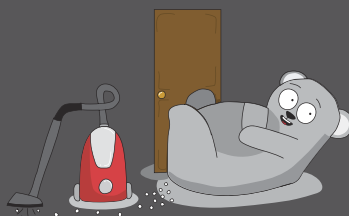

og gør værelset rent bagefter!

Andre praktiske oplysninger:

Maksimal vægt er 90 kg i stolen, og bør kun bruges af personer fra +3-12 år. To personer er nødvendige for at flytte stolen. Flyt ikke stolen ved at trække i ørerne eller benene, dette giver skader som ikke dækkes! For ørerne falder ikke af, af sig selv... Hvis produktet transporteres i et køretøj, skal produktet sikres for at forhindre, at det bevæger sig og skader nogen. Smid ikke med produktet, da vægten kan forårsage skade på både produktet og personer i dets nærhed. Sørg for, at gulvet under stolen er rent, sand og andre skarpe genstande vil beskadige stoffet. Denne skade vil ikke være dækket af garantien. Det er vigtigt at holde øje med personen under brug, da produktet er tungt og det kan påvirke kroppen fysisk. Bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag under brugen af produktet og afviser produktet generelt, skal produktet fjernes og ikke bruges til denne person. Når du begynder at bruge produktet, er det en god idé først at prøve det i 5-10 minutter for at teste dets effekt, og derefter øge tidsintervallet efter behov. Hvis personen bliver for vant til produktet, vil effekten aftage. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes forsigtigt. Tjek jævnligt for eventuelle skader eller løse genstande da indholdet kan være farligt for børn under 3 år. Hvis der er et hul, skal du straks få personen ud af stolen, og stille stolen i et lukket rum. Følg herefter anvisning under Miljø. For at opretholde den gode sidde komfort i stolen så fyld stolen op når den begynder at virke flad. Ved nyt EPS opfyld kontakt Majbritt Hillerup på mh@oliz.dk.

Læs og gem altid denne originale manual til fremtidig reference.

Dimensioner:

Længde: 1250 mm

Vægt: 10 kg

Bredde: 870 mm

Hver arm: 2 kg

Højde: 850 mm

Sammensætning:

100% imiteret læder/PU-materiale

Indvendig sammensætning:

8% polyethylen, 2% polyester, 90% EPS perler

Oliz® Koko-Nora bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmere på produktet.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og/eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv kan fjerne det! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi generelt, at personer, der bruger et Oliz® Koko-Nora produkt, overvåges under brugen. Efter brug af produktet skal personer, der har behov for opsyn, holdes uden for produktets rækkevidde. Sørg for, at luftvejene holdes frie, mens du bruger produktet, da materialet ikke er åndbart. Hvis personen har vejrtrækningsproblemer, må produktet ikke lægges på brystet, da vægten kan have en negativ effekt på vejrtrækningen og give kvælningssfare. Alle produkter med vægt skal bruges med forsigtighed, da vægten kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Oliz® Koko-Nora produkt må ikke bruges i nærheden af vand, da det kan forårsage drukningsfare. Hvis personen har hjerte- eller lungesygdom, skal du kontakte din læge, hvis du ønsker at bruge dette produkt

Miljø:

Beskyt miljøet, smid ikke stolen i husholdningsaffaldet. Adskil produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter som plastik, EPS-fyld og stof i henhold til almindelige lokale regler - i de relevante genbrugssystemer



SÅDAN FYLDER DU LONE



1. Vend stolen, så du kan se bunden



2. Åbn og luk lynlås med papirclips. Før clipsen ind i lynlås hovedet.



3. Åbn derefter velcroen indeni.



4. Træk velcroen ud af bunden.



5. Vend eller rul velcroen, som et ærme, for lettere adgang.



6. Fyld stolen med EPS fyld og luk den forsigtigt.

Husk at fjerne papirclipsen efter brug!