

SÅDAN KAN DU BRUGE LILLE LISE !

Lille Lise er udviklet til at vække borgere med kognitive udfordringer, der har tendens til at synke sammen, miste fokus eller falde hen. Hun hjælper med at skabe opmærksomhed, nærhed og tryghed. Lise har vægt i bunden, benene og hænderne. Vægten er nøje sammensat, så det føles beroligende og trygt, når borgeren holder hendes hånd. Det kan samtidig stimulere borgerens taktile behov. Lises højde hjælper borgeren med at rette sig op og opretholde en bedre kropsholdning. Den røde farve er valgt, fordi den tiltrækker opmærksomhed og kan virke aktiverende for borgere med kognitive udfordringer. Lise kan også være med til at skabe dialog og kontakt mellem borgeren og omgivelserne.

Lise har en fastgjort tandbørste, som ikke bliver væk. Tandbørsten kan bruges som hjælp til et sengetidsritual, hvor borgeren spejler Lise og selv børster tænder. Mange borgere med kognitive udfordringer kan have svært ved at skelne mellem dag og nat, og et fast ritual kan derfor skabe genkendelighed og ro. Man kan for eksempel sige: "Nu er det tid til at sove," lade Lise få børstet "tænder", og derefter hjælpe borgeren med at gøre det samme for derefter at de kan blive puttet samtidig. Kjolen har bløde fløjlsommer og glatte satinbånd som faste detaljer. Lise har en lynlås, som kan åbnes, hvor vaskeanvisningen er gemt og alt fyldet tages ud af.

For nogle borgere er det vigtigt at introducere Lille Lise langsomt. Nogle kan i starten reagere negativt eller skubbe Lise væk. Prøv derfor selv at sidde med hende først, eventuelt mens du synger en sang, så borgeren oplever, at hun ikke er farlig. Gå pædagogisk frem og gør Lise interessant for borgeren. Du kan for eksempel sige: "Vi skal passe på hende et stykke tid, og jeg har brug for din hjælp." Lad Lise sidde på dit skød, indtil borgeren virker tryk. Hvis borgeren bliver forskrækket over blikket, kan hun vendes væk. Når borgeren er klar, kan Lise flyttes over til borgeren i det tempo, borgeren kan være med til. Det er helt okay, hvis hun kun sidder der i få minutter i starten.

Under søvn eller hvile kan Lise erstatte den hånd, som nogle borgere finder trøstende. Placer Lise ved siden af borgeren og observer, om det virker beroligende. Hvis borgeren reagerer negativt, skal man være forsigtig og gå langsomt frem. Hvis borgeren er tryk ved at Lise ligger ved siden af, kan borgeren holde hendes hånd, eller personalet kan hjælpe borgeren med at kramme Lise. Hvis Lise bruges ved søvn, kan tandbørsten gemmes under kjolen ved at åbne lynlåsen foran. Vær dog opmærksom på, at tandbørsten stadig kan være synlig. Hvis Lise ligger ovenpå borgeren, skal man altid være opmærksom på vægten på bryst og mave, da det kan påvirke vejtrækningen. Ved tegn på ubehag skal Lise fjernes straks. En fordel ved Lise er, at borgeren selv kan fjerne hende, hvis de ikke længere ønsker hende tæt på. Når der er etableret en god rutine, vil der ofte opstå flere gode måder at bruge Lise på.

VIGTIGT!: HVIS LISE PLACERES PÅ GULVET, KAN DET FORÅRSAGE FALDSKADER!

Oliz/ Koko-Nora® Lille Lise er designet til personer i alderen fra +15 år. Borgere, der kræver opsyn, bør ikke sidde/lægge med Lille Lise alene.

Størrelse:	Højde: 720mm, Bredde: 310mm, Vægt: 2,7 kg
Materiale stof:	100% Polyester
Materiale indvendig:	40% Glas
	60% Polyester
Materiale kjole:	100% Bomuld

Oliz® Koko-Nora bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® Koko-Nora to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien. For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® Koko-Nora produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup. Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder i +2 år.



testet efter standarden EN71-1-2-3, samt EN21856:2022

DK



Lille Lise

Lille Lise er med til at vække de borgere med kognitive udfordringer der synker sammen og falder hen, som gerne må komme op i arousal. Lille Lise har tyngde i numsen, i benene og i hænderne, det giver dem en fornemmelse af nærhed og tryghed. Højden på Lille Lise er med til at borgeren retter sig mere op og får en bedre kropsholdning.

Dansk Design - produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz/Koko-Nora Aps - Birk Centerpark 84B - 7400 Herning - DK - Tlf: +45 20 78 79 54



Vigtige anvisninger:

Det er vigtigt at overvåge personen under brug, da produktet har en del tyngde, der kan påvirke personen fysisk. Et Oliz® Koko-Nora produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet og afviser det ad flere omgange, skal produktet fjernes og ikke bruges til denne person. Hvis produktet accepteres, skal det ses som et hjælpemiddel mod uro og stress og bruges i begrænsede tidsintervaller, alt afhængig af personens behov. Ved opstart af brugen af dette produkt, start da med 5-10 min. og se hvilken effekt det giver, og øg derefter tidsintervallet efter behov. Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortager sig. Ønsker personen at sove med produktet, er dette dog også muligt (se dog advarsler). Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden kan forårsage skade både på produktet og på personer i nærheden.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og/eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv kan fjerne det. Personen, der bruger et Oliz® Koko-Nora-produkt, må ikke synke sammen i ryggen ved brug. Sker dette, skal produktet fjernes øjeblikkeligt, da tyngden kan skade ryggen hos personen. Vi anbefaler generelt at sikkerhedsmæssige årsager, at personer, der bruger et Oliz® Koko-Nora-produkt, overvåges under brug. Efter endt brug skal personer, der kræver tilsyn, holdes uden for produktets rækkevidde. Hold luftvejene frie, når produktet anvendes. Hvis personen har besværet vejtrækning, må produktet ikke placeres på brystet, da tyngden kan have en negativ effekt på vejtrækningen og give kvælningssfare. Alle produkter med vægt bør bruges med forsigtighed, da vægt bl.a. kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Oliz® Koko-Nora-produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give risiko for drukning. Hvis personen har hjerte- og lungeproblemer, skal egen læge kontaktes ved ønske om brug af dette produkt. ❤️

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet skal du kun bruge Oliz® Koko-Nora-produktet indendørs. Det anbefales at bruge begge hænder, når produktet skal flyttes. Træk ikke i produktet, da dette kan give skader på produktet, hvilket ikke dækkes af garantien. Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal det fastgøres for at forhindre, at det flyver rundt og skader nogen. Hvis der er hul i produktet, skal det fjernes fra personen. Oliz® Koko-Nora-produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse dele og indhold kan være farligt for børn under 3 år samt mennesker med demens. Må ikke komme i mikrobølgeovn eller anden varmekilde.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter som glas, plast, stof og metal efter lokale bestemmelser i de relevante genanvendelsessystemer. **Der kan forekomme lidt glasstøv fra poserne med glasgranulat, men det glas, der er brugt i produktet, er testet og fri for skadelige kemikalier.** Du kan eventuelt støvsuge granulatposerne.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at Oliz® Koko-Nora-produktet opbevares utilgængeligt for personer, der kræver tilsyn, i en taske eller lignende. Hold produktet væk fra skarpe og varme genstande samt åben ild. (Tænder betragtes som skarpe genstande.)

Produkt: Lille Lise




FØR DU VASKER LILLE LISE !

Før du vasker Lille Lise, er det vigtigt at fjerne alle 7 inderposer. Følg trinene nedenfor for korrekt måde at tømme hende:



1. Start med at fjerne den store pose fra kroppen – dette er den største del inde i Lise.
2. Fjern fyldposen fra højre hånd.
3. Fjern fyldposen fra venstre hånd.
4. Fjern forsigtigt den lille pude fra hovedet.
5. Fjern den grå fyldpose fra siddedelen (bunden).
6. Fjern fyldposen fra højre ben.
7. Til sidst, fjern fyldposen fra venstre ben.
8. Lyn lynlåsen for at forberede til vask.

Pleje instruktioner:

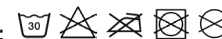

Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 30 grader (Lille Lise kommer i et pudebetræk før vask), Må ikke bleges, må ikke stryges, ikke egnet til tørretumbler, må ikke renses.

Vaskes separat. Oliz® Koko Nora anbefaler, at overfladisk snavs fjernes med en fugtig klud og sæbe, og at vask kun foretages en gang imellem, da gentagne vaske vil slide på produktet. Vask med desinficerende sæber egnet til tekstil.

Når Lille Lise er tør, fyldes den igen på samme måde, men i omvendt rækkefølge af, hvordan fyldet blev taget ud. Hvis vattet er klumpet sammen, kan den skilles ad, ved at trække i vattet, inden den placeres tilbage i kroppen. Dette forfrisker blødheden af Lille Lise og får hende til at føles som ny.

HVORDAN SKJULER MAN TANDBØRSTEN?



1.



2.

1. Åbn lynlåsen på kjolen. Sæt tandbørsten bag kjolen.

2. Luk lynlåsen bagefter. Vær dog opmærksom på, at det stadig kan stikke ud under kjolen. Du skal bare kigge lidt efter det.

Sådan gør du-videoer



Lise tømmes før vask



Lise fyldes efter vask