

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz Koko-Nora® produktet indendørs. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Oliz Koko-Nora® ville rigtig gerne kunne garantere, at vores produkter tåler alle former for bid, men det kan vi ikke. Tænder bliver iberegnet, som meget skarpe genstande, så bider personen i produktet, kan der gå hul på produktet, derfor undersøg altid produktet inden brug. Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes, og produktet må ikke trækkes i. Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen. Hvis der er hul i produktet, skal produktet fjernes omgående fra personen. Oliz Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år og mennesker med demens. Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde. Vær opmærksom på, at ligger produktet på gulvet kan det give faldskader, disse faldskader dækkes ikke af Oliz Koko-Nora®, så fjern altid produktet efter brug.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som glas og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer.


Det glas der er brugt i dette produkt er testet og uden skadelig kemi.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup. Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder i +2år.

Produkt: Liz 2kg

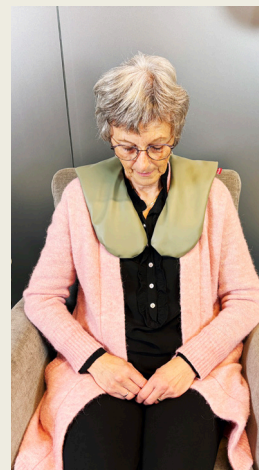

Oliz Koko-Nora® skulderpuden Liz er specielt designet til personer, der ofte oplever alvorlig fysisk spænding, rastløshed eller stress. Skulderpuden hjælper med til, at give afslapning og lindring i hverdagen. Den har en effektive virkning pga. tyngden og er nem at tage med rundt.

Læs altid og gem denne originale brugsanvisning til senere brug.

Liz Skulderpude

Dansk Design - produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz Koko-Nora- Orionvej 2A 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:



Oliz Koko-Nora® skulderpuden Liz, er et U-formet hjælpemiddel til større børn og voksne, der lider af anspændthed og uro. Den hjælper personen med, at mærke sig selv og slappe af i stressede situationer. Den kan være en erstatning af et par hænder fra en anden person, som trykker let på skuldrene, der er med til at føle tryk og afslapning. Skulderpuden Liz skal placeres på personens skuldre med benene hvilende på personens bryst. Sømmen der er midt på rygdelen af skulderpuden skal vende ind mod personens ryg, så er den placeret korrekt. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke personen fysisk. Hvis personen ikke har muskulatur til selv at sidde oprejst må skulderpuden ikke bruges og skal fjernes straks!

Oliz Koko-Nora® skulderpuden Liz på 2 kg er designet til personer fra +15 år. Størrelse: Længde 400 mm - bredde 380 mm - højde 15 mm se etiket for størrelse under rød flag label.

Materiale stof:	100% Imiteret læder/PU
Materiale indvendig:	100% glasperler

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz Koko-Nora® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel sprit eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt. Denne metervare er egnet til sygehus brug, da der kan bruges sprit holdige midler på produktet. Undgå dog Rensebenzin og lign. da dette kan skade metervaren.

Vigtig:

Sørg for, at når produktet er i brug, at det sidder korrekt, følg anvisninger som er givet.

Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, og afviser produktet ad flere omgange skal produktet fjernes, og ikke bruges til denne person. Hvis Produktet accepteres skal produktet ses, som et hjælpemiddel mod uro og stress og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af personens behov. Ved opstart af brugen af dette produkt, så start ud med 5-10 min og se hvilken effekt det giver og forøg derefter tidsintervallet efter behov. Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortager sig. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i den kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv kan fjerne det! Personen der bruger et Oliz produkt må ikke synke sammen i ryggen ved brug, sker dette skal produktet fjernes øjeblikkeligt, da tyngden kan skade ryggen hos personen! Vi anbefaler generelt at sikkerhedsmæssige årsager, at personer der bruger et Oliz Koko-Nora® produkt overvåges under brug. Efter endt brug af produktet skal personer der kræver tilsyn holdes uden for produktets rækkevidde. Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke placeres på brystet, da tyngden kan have en negativ effekt på vejtrækningen og give kvælningfare. Alle produkter med vægt bør bruges med forsigtighed, da vægt bl.a. kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare. Hvis personen har hjerte og lunge problemer, skal man kontakte sin egen læge ved ønske om brugen af dette produkt. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.